

病理部公告

編號：AP-An-11203

主旨：細胞病理科提供 Bronchial Brushing 和 Bronchial Washing
之檢驗資訊

執行院區：☒總院 ☐柳營 ☐佳里 ☐樹林院區 ☐南科

受文單位：永康總院加護病房

內容：

1. 由於臨床單位對於細胞學檢查 Bronchial Brushing 和 Bronchial Washing 之採檢容器不是很清楚。
2. 提供 Bronchial Brushing 和 Bronchial Washing 之檢驗資訊表作參考。
3. 請參閱附件。

艾世和
2023/7/31

執行日期：即日起

聯絡單位：總院 細胞 組；分機：53692/53672

柳營 組；分機：

佳里 組；分機：

本通告除給予各受文單位外同時於病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師

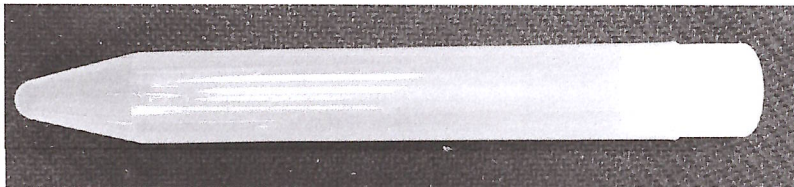
QP0301-03

編修日期：2022.04.18

奇美醫院病理部檢驗資訊表

更新日期： 111 年 04 月 18 日

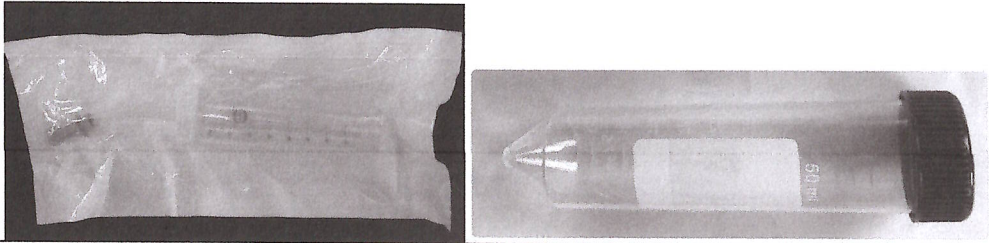
QP0701-01

檢驗項目名稱	Bronchial brushing / 支氣管刷出物	計價碼	15021-20
檢體種類	支氣管細胞	檢體量	
採檢適用容器	BD 尖底離心管 		
加作檢驗	特殊染色		
採檢注意事項	1. 先取 8~10mL CytoRich Red 固定液於 BD 尖底離心管。 (採檢單位若無備料，請至臨床病理部臨床服務組領取)。 2. 對病灶進行刷出後，放入含有 8~10ml CytoRich Red 之 BD 尖底離心管內，於固定液內來回晃動約三到五次，盡量將刷出的細胞沖出，完成後蓋回蓋子，並上下搖晃使其混和均勻。 3. 貼上含病人資訊標籤。 4. 檢體的來源需確實標示清楚，若是檢體部位有左、右...等區別也需確實註明清楚。 5. 同一病人不同部位，須分別開立檢驗申請單。		
輸送條件	1. 總院內：常溫保存。 2. 非總院：常溫保存。		
檢驗儀器	BD Totalys™ SlidePrep 自動處理染色機、離心機、高速震盪器、自動封片機、顯微鏡		
檢驗方法	PAP Stain、人工閱片		
檢驗試劑	PrepStain 染色劑、100%酒精、CytoRich Red		
報告完成時間	3 天		
臨床意義	細胞學檢測有無惡性病變。		
干擾因素	不適用		
操作組別/分機	細胞病理科 53692/53693		
委外代檢	☒ 否 ☐ 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話：_____ 地址：_____		
備註	無		

奇美醫院病理部檢驗資訊表

更新日期： 111 年 04 月 18 日

QP0701-01

檢驗項目名稱	Bronchial Washing /支氣管沖洗液	計價碼	15021-28
檢體種類	支氣管細胞	檢體量	至少 3ml
採檢適用容器	支氣管沖洗瓶 或 50mL 尖底試管 		
加作檢驗	特殊染色		
採檢注意事項	1. 沖洗完後液體裝於支氣管沖洗瓶後送檢至細胞病理科。 2. 或沖洗完後液體裝於 50mL 尖形離心瓶內，隨即送至細胞病理科。 3. 貼上含病人資訊標籤。 4. 檢體的來源需確實標示清楚，若是檢體部位有左、右...等區別也需確實註明清楚。 5. 同一病人不同部位，須分別開立檢驗申請單。		
輸送條件	1. 總院內：立即送檢，若無法立即送檢，將檢體放置 2~8℃ 冰箱內保存。 2. 非總院：檢體放置 2~8℃ 冰箱保存。		
檢驗儀器	BD Totalys™ SlidePrep 自動處理染色機、離心機、高速震盪器、自動封片機、顯微鏡		
檢驗方法	PAP Stain、人工閱片		
檢驗試劑	PrepStain 染色劑、100%酒精、CytoRich Red		
報告完成時間	3 天		
臨床意義	細胞學檢測有無惡性病變。		
干擾因素	不適用		
操作組別/分機	細胞病理科 53692/53693		
委外代檢	☒ 否 ☐ 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話：_____ 地址：_____		
備註	無		