

臨床病理部公告

編號：CP-An-110-34

主旨：項目「 γ -interferon」採檢容器，異動為同廠商新一代診斷

試管組 Quantiferon-TB Gold Plus(QFT Plus)

執行院區：■永康 □柳營 ■佳里 □樹林院區 □南科


受文單位：全院各臨床單位

內容：

一、項目「 γ -interferon」採檢容器，異動為同廠商新一代診斷試管組 Quantiferon-TB Gold Plus(QFT Plus)。

二、檢體採檢規則：

1. 採檢前，請至收件中心索取 Quantiferon-TB Gold Plus 診斷試管組(一組有灰色、綠色、黃色、紫色，共四管，須依上述順序採檢。)
2. 血量範圍為 0.8-1.0.mL 全血(即至試管標示黑色刻度處)(如圖一)。
3. 檢體採檢後需立即將試管上下混合均勻，並於採檢後 16 小時內，室溫 (17-25°C)送至收件中心。
4. 送檢時段：週一至週五全時段皆可送檢。唯例假日及國定假日當日及前一日請勿採檢送驗。

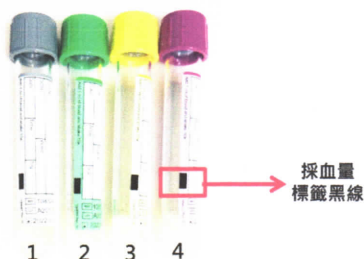

(圖一)

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師

三、 檢驗項目：

γ -interferon 檢測(計價碼:14981)。

γ -interferon 檢測(公費)(計價碼:14981-1)。

四、 報告格式及參考區間

1. γ -interferon 報告為定性結果，即Positive或Negative。

2. 參考區間

Nil (IU/mL)	TB1 Ag minus Nil (IU/mL)	TB2 Ag minus Nil (IU/mL)	Mitogen minus Nil (IU/mL)	γ -interferon 結果
≤ 8.0	≥ 0.35 和 $\geq 25\%$ Nil 值	≥ 0.35 和 $\geq 25\%$ Nil 值	任何值	Positive
	< 0.35	< 0.35	≥ 0.5	Negative
	≥ 0.35 和 $< 25\%$ Nil 值	≥ 0.35 和 $< 25\%$ Nil 值	≥ 0.5	Negative
	< 0.35	< 0.35	< 0.5	Indeterminate
	≥ 0.35 和 $< 25\%$ Nil 值	≥ 0.35 和 $< 25\%$ Nil 值	< 0.5	Indeterminate
> 8.0	任何值	任何值	任何值	Indeterminate

五、 報告時效：7個工作天。

陳自如
2021.6.23
楊子堯
2021.06.23

執行日期： 110 年 06 月 25 日起

聯絡單位： 永康 特殊檢驗 組；分機：53673、53696

佳里 檢驗科 ；分機：33280

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師